

TIGER TRACK®

Cannulated screws
Vis canulées



Cannulated screw Ø 2,9mm
Vis canulée Ø 2,9 mm



Cannulated screw Ø 2,2mm
Vis canulée Ø 2,2 mm



HEADLESS CANNULATED COMPRESSIVE SCREWS FOR SMALL FRAGMENTS
VIS CANULEES AUTO COMPRESSIVES POUR PETITS FRAGMENTS

TIGER TRACK® Cannulated screw / *Vis canulée*

Description


- Ø 2.2mm (HV22) and Ø 2.9mm (HV29) cannulated headless compressive screws
Vis canulées auto compressives Ø2,2 (HV22) et Ø 2,9 mm (HV29)
- Ø 0.8mm lg 100mm kwire guide in Phynox (CoCr) for screws HV22
Broche guide de Ø 0.8 mm lg 100 mm en Phynox (CoCr) pour les vis de Ø 2.2 mm
 - More rigid than Inox, allowing better control and avoiding kwire bending
Plus rigide que les broches en Inox pour un meilleur contrôle, et éviter les pliages
- Ø 1.0mm lg 100mm for screws HV29
Broche guide de Ø 1.0 mm lg 100 mm pour les vis de Ø 2.9 mm
- Self drilling / *Auto perforantes*
- Self tapping (proximal et distal thread)
Auto taraudantes (filet proximal et distal)
- Extended thread for rapid insertion
Un Pas de vis long pour vissage rapide
 - Reduction OR time / *Réduction du temps opératoire*
 - Better cortical and cancellous bone grip
Meilleure tenue dans l'os spongieux et cortical
- Longer screw head for better stability in the first cortical
Tête de vis plus longue pour une meilleure stabilité dans la première corticale
- Hexalobe Torx T7
 - Secure connection between the head of the screw and the screw driver
Assure une meilleure tenue du tournevis dans la tête de vis

Ordering Information

Références de commande

Implants

Ø 2.2 mm		Ø 2.9 mm	
HV2211	L 11 mm	HV2911	L 11 mm
HV2213	L 13 mm	HV2913	L 13 mm
HV2215	L 15 mm	HV2915	L 15 mm
HV2217	L 17 mm	HV2917	L 17 mm
HV2219	L 19 mm	HV2919	L 19 mm
HV2221	L 21 mm	HV2921	L 21 mm
HV2223	L 23 mm	HV2923	L 23 mm
HV2225	L 25 mm	HV2925	L 25 mm
HV2227	L 27 mm	HV2927	L 27 mm
HV2229	L 29 mm	HV2929	L 29 mm
HV2231	L 31 mm	HV2931	L 31 mm
		HV2933	L 33 mm
		HV2935	L 35 mm
		HV2937	L 37 mm
		HV2939	L 39 mm

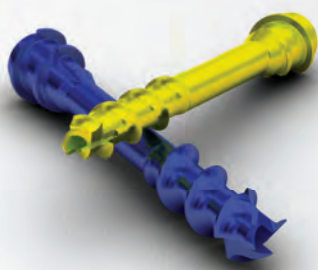

Instruments

HV9001	Phynox Kwires Ø 0.8mm lg 100mm for screws HV22 <i>Broches guide en phynox Ø 0.8mm lg 100 mm pour vis HV22</i>
HV9002	Stainless steel Kwires Ø 1.0mm lg 100mm for HV29 <i>Broches guides en inox Ø 1.0 mm lg 100 mm pour vis HV29</i>
HV9003	Cannulated screw driver Torx T7 for screws HV22 and HV29 <i>Embout tournevis Torx T7 canulé pour vis HV22 et HV29</i>
HV9004	AO screw driver tip for screws HV18 and HV25 <i>Embout AO creux pour vis HV18 et HV25</i>
HV9005	Pin Length Indicator <i>Indicateur de longueur sur broche</i>
HV9006	Cannulated drill Ø 1.8mm for screws HV29 <i>Mèche canulée Ø 1.8 mm pour vis HV29</i>
HV9007	Drill Ø 1,2mm for screws HV22 <i>Mèche Ø 1.2 mm pour vis HV22</i>
HV9008	Cannulated proximal cortex drill for screws HV22 <i>Fraise à chambrer canulée pour vis HV22</i>
HV9009	Cannulated proximal cortex drill for screws HV29 <i>Fraise à chambrer canulée pour vis HV29</i>
HV9010	AO Handle <i>Manche embout AO</i>
HV9011	Ø 0.8mm kwires container <i>Container pour broches 0.8 mm</i>
HV9012	Ø 1.0mm kwires container <i>Container pour broches 1.0 mm</i>
HV9015	TigerTrack® sterilisation tray <i>Boîte de rangement TigerTrack®</i>
HV9016	Reverse screw driver <i>Tourne à gauche</i>
HV9020	Depth gauge / <i>Jauge de profondeur</i>
HV9023	Non cannulated Torx T7 screw driver for screws HV22 and HV29 <i>Embout tournevis Torx T7 non canulé pour vis HV22 et HV29</i>
HV9024**	Short non cannulated stepped drill for screws HV22 <i>Mèche étagée courte non canulée pour vis HV22</i>
HV9025**	Short cannulated stepped drill for screws HV29 <i>Mèche étagée courte canulée pour vis HV29</i>
HV9026**	Long non cannulated stepped drill for screw HV22 <i>Mèche étagée longue non canulée pour vis HV22</i>
HV9027**	Long cannulated stepped drill for screws HV29 <i>Mèche étagée longue non canulée pour vis HV29</i>
HV9030	Additional (empty) sterilisation tray <i>Boîte de rangement additionnel (vide)</i>

** Optional / *En option*

Ref : ED5.0EF-0513

CE-1014

SYNCHRO MEDICAL SARL 450 435 029 R.C.S
21, rue des merisiers
F-68920 Wettolsheim les Erlen France

Tél. : +33(0) 3 89 23 75 64
Fax : +33(0) 3 89 27 14 52

Arthroplastie Diffusion SARL 453 737 868 R.C.S
14 chemin de la place, Pollet
F-01800 Saint Maurice de Gourdans France

synchro@synchro-medical.com

www.synchro-medical.com

